




六、使用本产品

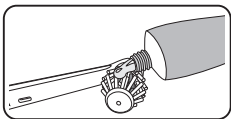


◆ 本产品能够适用于任意品牌牙膏，请将牙膏涂在内外刷头之间。

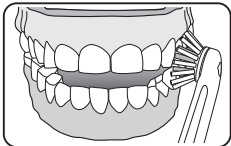

◆ 此款牙刷设置有内外双刷头，可以同步洗刷牙齿的内、外及顶面，同时采用牙医推荐的打圈刷牙方式，所以可以有效缩短刷牙的时间。

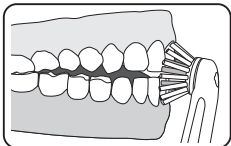

◆ 先将牙刷放在口腔内，再打开电源。刷牙时，请将上下牙齿置于内外刷头之间；请勿咬紧牙齿，一定要保证上下牙齿有一定的间隙，让刷头可以转动。

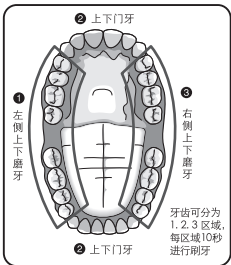

◆ 我们将口腔分成3个区域，每个区域刷牙时间为10秒，总共刷牙时间为30秒。当然也可以根据自身需要，追加一个刷牙循环。

◆ 专业计时器，此型号的电动牙刷具有30秒智能语音提醒功能，每10秒会短音提醒更换刷牙区域，30秒后会自动关闭。

NY-600

5

七、清洁建议



使用后，保持开关开启并将刷头置于流水下几秒进行冲洗，然后关闭开关，取下刷头，分别清洗刷头和牙刷主体后擦干。


更换刷头：牙医建议每3个月更换刷头，以防止细菌附着，获得最佳的清洁效果。

八、电池移除

请在产品使用寿命结束时，如下所示打开手柄，移除充电电池并将其送至当地法定规定的回收或处理场所或按照当地的环保规定进行处理。

警告

除了废弃产品以外，不要任意拆卸产品。任意拆卸可能会造成短路，火灾或其他伤害。您可将产品送至官方服务中心进行维修（如电池更换）。

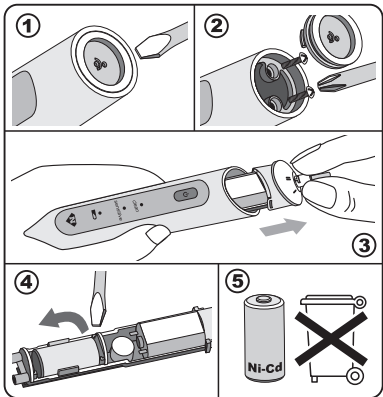

NY-600

6

九、保修



我们为产品提供2年的有限保修（包括牙刷主体，不含刷头等易耗品），保修期从购买日开始计算。在保修期内对于材料或生产过程引起的各种瑕疵，我们会视情况更换零件或整个产品。本保修适用于全球范围内所有纽乐公司及其指定供应商出售的纽乐产品。

上述保修不包含以下内容：由于使用不当造成的产品损坏；正常使用引起的产品老化、磨损（如刷头等）；以及对产品的价值或使用功能影响不大的一些瑕疵。如果产品经过未经授权的人员修理或产品使用了非本公司（纽乐公司）的零件，保修立即终止。

若在保修期内需要维修，请在保修期内将本产品与销售收据一起交给授权的售后服务中心。



使用手机微信扫描上面二维码，关注我们的微信服务平台，可获得在线产品注册和相关售后服务，并可第一时间获得新产品和优惠活动资讯。

杭州纽乐科技有限公司

地址：杭州市西湖区留和路139号32幢

电话：0571-87380396

传真：0571-86901299

邮箱：Newlytech@163.com.

邮政编码：310023

NY-600

7



新型电动牙刷
Electric toothbrush

使用说明书
User manual



NY-600

www.Newly-Tech.com

保修卡



型 号 NY-600

购买日期

销售点

顾客姓名

网购用户名

联系电话

联系地址

故障描述

请认真填写以上信息，并将此卡连同需要维修的产品一起寄往我公司维修中心。

最终解释权归杭州纽乐科技有限公司所有

产品使用指南



一、谨以致谢

感谢您的惠顾，纽乐全方位柔转电动牙刷拥有先进的内外双刷头，以低速转动实现同步洗刷牙齿内外及上下齿面，并能更有效帮助清洁牙齿。为了您能更好的使用，请仔细阅读本说明书。

二、重要注意事项

◆ 本产品不适合3岁以下儿童或身体、感官、精神上行为能力缺失的人使用，除在其监护人的指导下安全使用外。

◆ 行动不便者和儿童需要在成人监管下安全使用本产品。一般来说，我们建议您将产品摆放在儿童无法接触的地方。

◆ 儿童需要在成人监管下使用以确保产品不会用于玩耍。

◆ 如果产品被摔落，即使没有明显的损坏也请在下次使用前替换刷头。

◆ 如果您正在进行口腔治疗，请在使用前咨询您的口腔专家。

◆ 本产品设计仅用于清洁牙齿、牙龈。请勿用作任何其它用途。如果感觉任何不适或疼痛，请停止使用本产品并与医生联系。


◆ 不要将插座摆放在水里或其他液体中。不要用带水的手触碰插头以免触电。拔出插头时请注意握住插头而不是电源线。

◆ 请停止使用变形或刷毛弯曲的牙刷头。

◆ 不要改动和自行修复产品。这些行为可能会导致火灾、触电或其他伤害。请咨询商家或纽乐售后服务中心进行维修。除了丢弃电池以外，请不要拆卸产品。

三、产品描述

产品配置：手柄1支、充电底座1个、刷头2个、说明书1份

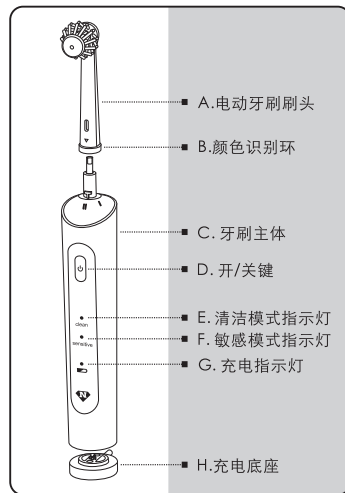


四、产品规格

产 品	电动牙刷-充电型
型 号	NY600
额定输入	5.0V DC
工作时间	60分钟 约4周

五、使用准备

1. 安装刷头

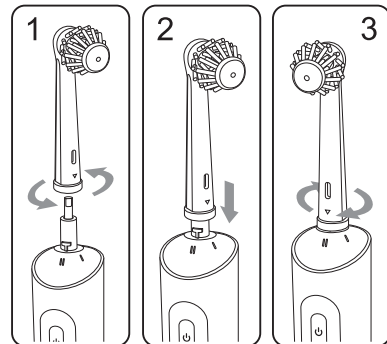


将刷头上的三角标志对准牙刷上的1字标志

将刷头和牙刷上的标志对齐后将刷头插入牙刷

转动刷头使三角标志对齐牙刷上的2字标志完成刷头安装

2. 牙刷充电

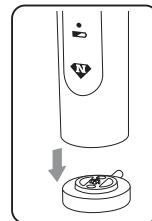

- 本牙刷充电器不带电源插座，但可以使用手机充电器或电源USB接口。
- 开始充电前先关闭牙刷电源。
- 将牙刷放置到充电底座上，充电指示灯红灯点亮。
- 电池充满后，绿色指示灯点亮。
- 如六个月以上未使用，请充电5小时以上再使用。